



Klarity
BETTER

科莱瑞迪OpenFace定位膜

OpenFace定位膜在脸部位置做了预开窗设计，方便操作者在塑形时把脸部位置打开，以减轻患者不适感，额头部位的加强型网孔设计保证了开窗膜片的固定强度。

OpenFace定位膜的两个优势应用：

- ① 幽闭恐惧症患者的头部和头颈肩固定；
- ② 体表引导放疗(SGRT)中的头部固定。



可根据患者脸型对开口区域做合适的拉伸，以实现最佳的舒适度同时保证固定强度。




R461-8SHTF

S型OpenFace头部定位膜

规格：278x318mm

3.2mm，加强型网孔

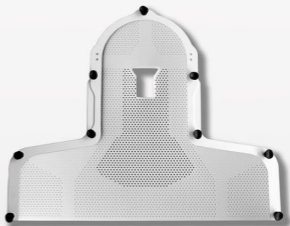

R461-8STF

S型OpenFace头颈肩部定位膜

规格：608x480mm

3.2mm，加强型网孔

黑色OpenFace定位膜具有更高的固定强度，由于黑色与皮肤颜色具有更大的对比度，因此特别适用于体表引导放疗(SGRT)。



加长部分在塑形时可上翻，从而在下颌位置形成双层固定，可大大提高固定强度。



RB461-1SHT

黑色S型OpenFace头部定位膜

规格：279x386mm

3.2mm，加强型网孔


浅绿色卡条式OpenFace定位膜



RDLG105-24AF

浅绿色卡条式OpenFace头部定位膜

2.4mm，加强型网孔

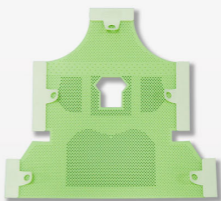

RDLG207-24AF

浅绿色卡条式OpenFace头颈肩部定位膜

2.4mm，加强型网孔

* SGRT是Surface Guided Radiation Therapy的缩写，即体表（图像）引导放疗。